

## ■ Filtres Safe-Cone



Des pincettes pour le remplacement des filtres dans les pipettes sont fournies avec toutes les pipettes sauf mLINE®.

Ejecteur de filtre incorporé dans mLINE®

### Pourquoi utiliser des filtres Safe-Cone ?

Ces filtres uniques et remplaçables en polyéthylène (PE) servent de barrière finale pour empêcher tout fluide ou vapeur d'atteindre les parties internes de la pipette.

- Protection de la pipette et de l'échantillon contre la contamination
- Prolongation de la durée de vie de la pipette
- Allongement des intervalles d'entretien
- Meilleur rapport efficacité-prix par rapport aux pointes à filtre

### Quand les utiliser ?

Ces ultimes protections de pipette sont disponibles en deux types :

#### Filtre Plus

Pour les applications particulièrement exigeantes telles que le travail avec des matériaux radioactifs, la culture de cellules, le travail bactériologique et virologique et la biologie moléculaire

#### Filtre standard

Pour les applications générales. Peut être utilisé pour des travaux du même type que le Filtre Plus, mais doit alors être changé plus souvent.


### Quelle est la fréquence de remplacement ?

L'intervalle de changement du filtre dépend de l'application et de l'échantillon. Toutefois, selon les analyses effectuées, il est recommandé de changer le filtre quotidiennement (après 50 à 250 pipetages) et immédiatement en cas de sur-aspiration.

### Comment le changer ?

Pour s'assurer que l'utilisateur est protégé de toute contamination, il faut utiliser des pincettes pour extraire les filtres usagés du cône de la pointe de pipette. mLINE® dispose également d'un éjecteur de filtre intégré. Il faut cependant nettoyer le cône de la pointe à l'éthanol (70%) avant d'insérer un nouveau filtre.

### Contamination dans le corps de la pipette

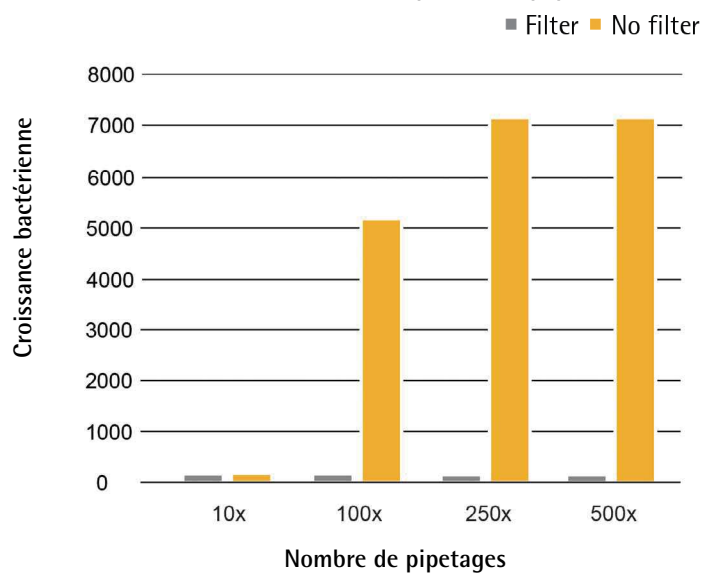

Contamination dans le corps de la pipette après pipetage d'une culture bactérienne de *Micrococcus Luteus*.

### Informations de commande

#### Filtres Safe-Cone

| Référence | Désignation           | Qté/Unité |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 721008    | Standard Ø 2,51 mm PE | 50        |
| 721007    | Standard Ø 3,15 mm PE | 50        |
| 721006    | Standard Ø 5,33 mm PE | 50        |
| 721005    | Standard Ø 6,73 mm PE | 50        |
| 721014    | Standard Ø 1,83 mm PE | 50        |
| 721018    | Plus Ø 2,51 mm PE     | 50        |
| 721017    | Plus Ø 3,15 mm PE     | 50        |
| 721016    | Plus Ø 5,33 mm PE     | 50        |
| 721015    | Plus Ø 6,73 mm PE     | 50        |

PE = polyéthylène